






## 检视或更改处方

开机，当屏幕出现「按绿色键开始执行」时，

- 按  屏幕显示：「更改程序」
- 按  屏幕显示：「治疗方式：CCPD/IPD」
- 按  屏幕显示：「总治疗量：XXXX ml」
- 按  屏幕显示：「治疗时间：\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_」
- 按  屏幕显示：「注入量：XXXX ml」
- 按  屏幕显示：「最末袋注入量：XXXX ml」
- 按  屏幕显示：「最末袋葡萄糖浓度：相同/不同」
- 按  屏幕自动显示：「周期数：XX」  
「留置时间：\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_」



1. 若选择更改左列项目请按 ，
2. 再按  或  更改选项或增减数字，
3. 更改后，再按  确认。
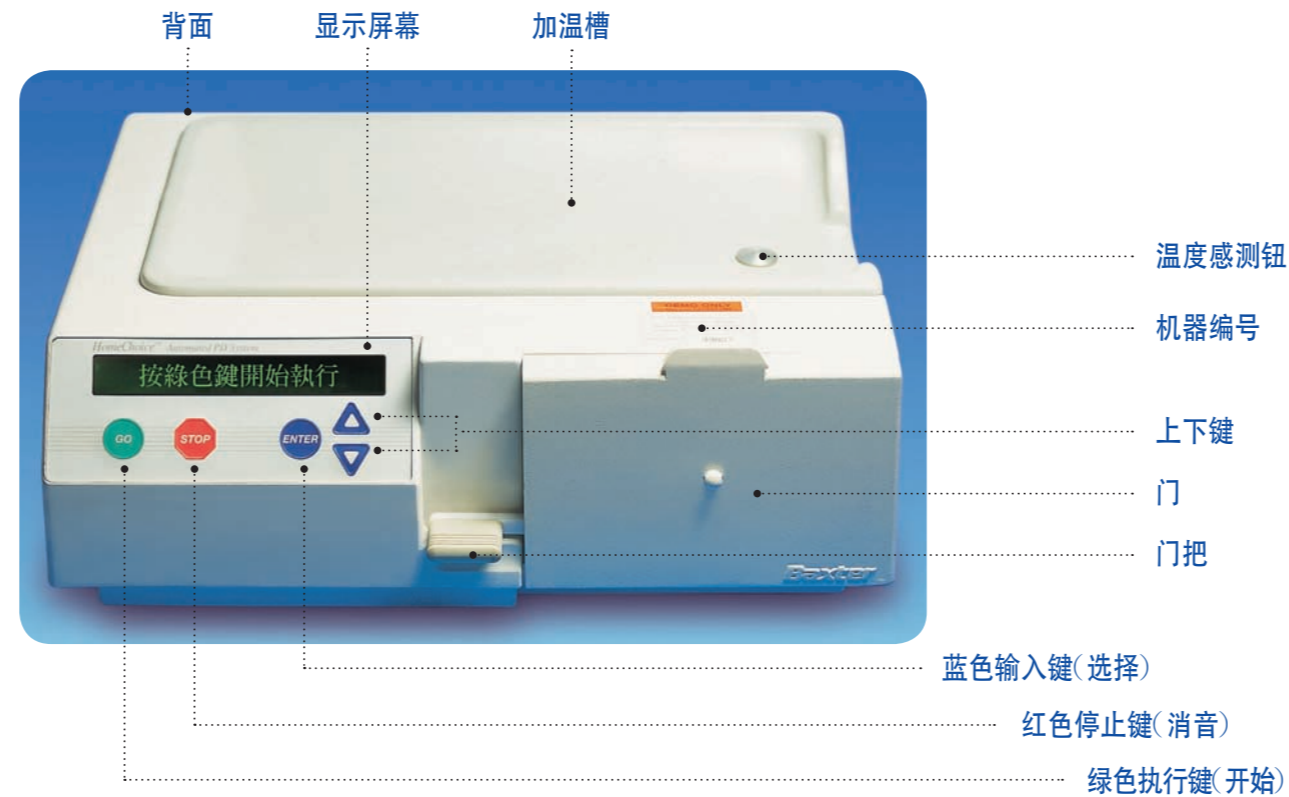
## 机器说明







## 警示问题之处理

机器有异常状况发生时，会发出警讯声和停止透析液的输送，并将问题显示在屏幕上。当机器发生连续性哔声时：


1. 按  红色键消音。
2. 处理屏幕上显示之讯息，请参阅居家指导手册之警示问题处理章节。
3. 矫正问题后，按  绿色键，机器会继续治疗。

## 停电之处理

当电源不足或电力丧失时，机器会停止运作，而且面板上的讯息也会消失。当电力恢复时，机器会出现「按绿色键开始执行」的字幕。

- 如果电力在30分钟内恢复，机器不会发出警讯声并会继续执行治疗。
- 如果电力在30分钟内未恢复，机器会发出连续哔声并显示「电力丧失」之讯息。
  1. 按  红色键消音。
  2. 按  向下键检视透析治疗资料，等待电力恢复。
- 若电力在2小时内恢复，机器会发出连续哔声并显示「电力恢复」之讯息。
  1. 按  红色键消音。
  2. 按  绿色键，继续治疗。
- 若电力在2小时后未恢复，请与机器分离，待电力恢复后再重新上机。

## 抛弃式管组说明

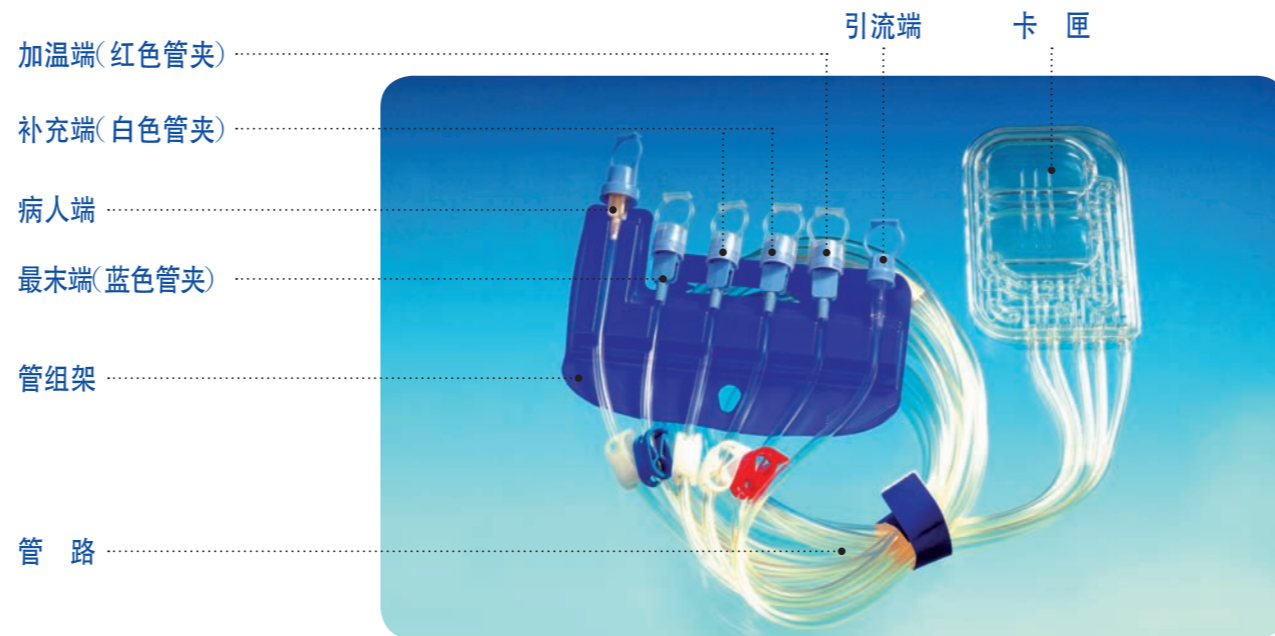

# 全自动腹膜透析机操作手册

HomeChoice™ – The system you can trust



# HomeChoice™ 全自动腹膜透析机



## 特色

- 值得信赖—全球已超过50万人使用
- 中文字幕，易学习易操作
- 个人化处方设定，符合您的需求
- 体积轻巧让您携带方便


## 全自动腹膜透析机操作步骤

### 0 上机前准备



1. 准备用品
  - 新鲜透析液
  - 引流桶(或延长管)
  - 抛弃式管组
  - 口罩
  - 迷你帽×2
  - 干洗手
2. 清洁桌面
  - \* 电源开启前先清洁机器

### 1 上机

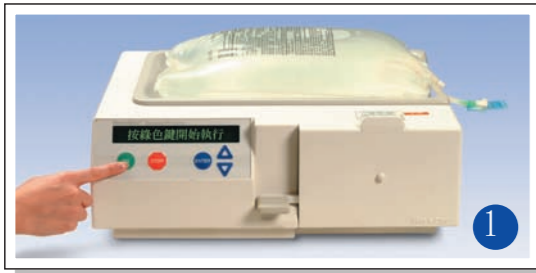

- 打开电源 等待屏幕自动显示「按绿色键开始执行」
1. 将透析液袋放置于机器加温槽上，透析液需盖过温度感测钮，另一袋则放置於机器旁。(图1)
  2. 戴上口罩并洗手。
  3. 检查透析液容量、浓度、效期、出口拉环、绿色出口塞、透析液外观。
  4. 检查抛弃式管组护帽是否完整并关闭所有管夹。



- 按 GO 屏幕显示「装置管组」
1. 打开门盖，将管组卡匣置入凹槽内，将门盖上，并将门把压到底。(图2)
  2. 将管组架挂於门上。
  3. 取下引流管并移除拉环，将引流管固定於引流桶内的上缘。



- 按 GO 屏幕显示「机器自我测试」，请再次洗手。测试完成后，屏幕会自动显示「连接透析液袋」
1. 取下红色管夹管路，连接到加温槽上透析液袋后，折断绿色出口塞并打开红色管夹。(图3)
  2. 取下白色管夹管路，连接到补充袋透析液后，折断绿色出口塞并打开白色管夹。  
如果您需要使用不同浓度的最末袋，则连接蓝色管夹管路到透析液袋，折断绿色出口塞并打开蓝色管夹。
  3. 打开病人端管路的管夹，外露输液管组。



- 按 GO 屏幕显示「排气」，请再次洗手。排气完成后，机器屏幕闪烁显示「连接你自己」与「确定病人端管路」
1. 连接自己前，需先确认透析液面上升至病人端管路拉环处，并关闭管夹。
  2. 取下病人端管路，连接到身上的输液管，旋转至密合为止。(图4)
  3. 转开病人端管夹及输液管开关。

### 2 治疗开始




- 按 GO 机器屏幕显示「0周期引流」(图5)
- 待完成0周期引流后即开始透析疗程。机器会自动进行引流、注入和留置直到完成疗程为止，这段时间您可以先取下口罩，进行阅读书报、休息或就寝。

### 3 治疗完成



- 按 GO 屏幕显示「关闭所有管夹」
1. 关闭身上输液管开关。
  2. 关闭管组上病人端管夹。

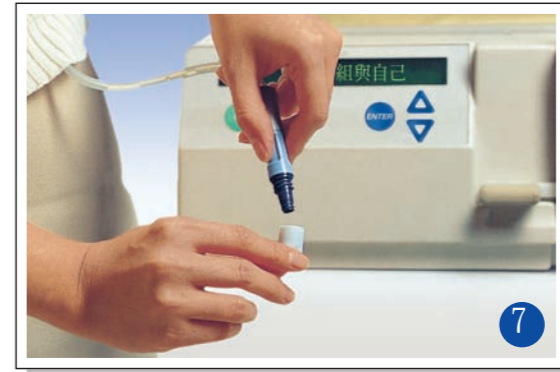

- 按 GO 屏幕显示「分离你自己」
1. 戴口罩并利用干洗手清洁双手。
  2. 打开新的迷你帽包装，分离病人端管路后，立即套上新的迷你帽。(图7)
- 按 GO 屏幕显示「关机」，请先将下列的资料记录於『APD每日记录本』上：

### 4 记录



- 按 GO 0周期引流量：XXXX ML (图8)  
(请记录屏幕上显示之数字)
- 按 GO 总脱水量：XXXX ML  
(请记录屏幕上显示之数字)
- 按 GO 平均留置时间：XX:XX(小时:分钟)  
(请记录屏幕上显示之数字)

### 5 关机

- 打开门，取出卡匣。  
关闭电源。

### 6 善后处理

- 将取下之管组连同透析液袋，直接丢入垃圾桶。  
引流桶内的透析液倒入马桶后，清洗引流桶并沥干。