

PERIKSA ATAU MEROBAH RESEP

BUKA MESIN, BILAMANA LAYAR MONITOR SUDAH MEMPERLIHATKAN 「按綠色鍵開始執行」, MAKA TEKANLAH TOMBOL ▽ DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「更改程式」

- TEKAN TOMBOL **ENTER** DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN : 「治療方式: CCPD/IPD」
- TEKAN TOMBOL ▽ DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN : 「總治療量: XXXX ml」
- TEKAN TOMBOL ▽ DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN : 「治療時間: _____」
- TEKAN TOMBOL ▽ DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN : 「注入量: XXXX ml」
- TEKAN TOMBOL ▽ DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN : 「最末袋注入量: XXXX ml」
- TEKAN TOMBOL ▽ DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN : 「最末袋葡萄糖濃度: 相同/不同」
- TEKAN TOMBOL **STOP** LAYAR MONITOR OTOMATIS AKAN MEMPERLIHATKAN : 「週期數: XX」
- 「留置時間: _____」

BILAMANA BERNIAT MEROBAH CATATAN KIRI INI, SILAHKAN TEKAN TOMBOL **ENTER**, TEKAN ▲ ATAU ▽ UNTUK PERUBAHAN ANGKA, SETELAH ITU TEKAN TOMBOL **ENTER** LAGI UNTUK KEPASTIAN.

CARA PENYELESAIAN PERINGATAN

BILAMANA TERJADI KELAINAN PADA MESIN, MAKA AKAN ADA SUARA PERINGATAN DAN PENYALURAN CAIRAN PENELITIAN AKAN TERHENTI, SEKALIGUS LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN PERSOALAN YANG TIMBUL. BILAMANA MESIN TERUS MENERUS MENGELUARKAN SUARA PI...PI...PI :

1. TEKAN TOMBOL **STOP** WARNA MERAH UNTUK HENTIKAN SUARA.
2. LAKUKANLAH PETUNJUK YANG TERDAPAT DALAM BUKU PETUNJUK UNTUK PENYELESAIAN BERBAGAI PERINGATAN SESUAI DENGAN APA YANG DILAYAR MONITOR.
3. SETELAH DIBETULKAN, TEKANLAH TOMBOL **GO** WARNA HIJAU UNTUK KEMBALI BEROPERASI, DAN PENGOBATANNYA AKAN DITERUSKAN.


CARA MENANGANI MATI LISTRIK

BILAMANA TENAGA LISTRIK TIDAK CUKUP ATAU MATI, MESINNYA AKAN BERHENTI BEROPERASI, DAN SEMUA DATA-DATA DILAYAR JUGA AKAN HILANG. BILAMANA LISTRIKNYA TELAH DIPULIHKAN, MAKA MESIN AKAN MEMPERLIHATKAN 「按綠色鍵開始執行」

- BILAMANA LISTRIK DIPULIHKAN DALAM JANGKA WAKTU 30 DETIK, MAKA MESIN TIDAK AKAN MENGELUARKAN SUARA DAN OPERASI PENGOBATAN MASIH AKAN JALAN TERUS.
- BILAMANA LISTRIK TIDAK BERHASIL DIPULIHKAN DALAM JANGKA WAKTU 30 DETIK, MAKA MESIN AKAN KELUARKAN SUARA PERINGATAN TERUS MENERUS DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「電力喪失」
 1. TEKAN TOMBOL **STOP** WARNA MERAH UNTUK MATIKAN SUARA.
 2. TEKAN TOMBOL ▽ DAN PERIKSA DATA PENELITIAN, TUNGGU SEJENAK AGAR LISTRIK DIPULIHKAN.
- BILAMANA LISTRIK DIPULIHKAN DALAM JANGKA WAKTU 2 JAM, MESIN AKAN TERUS MENERUS MENGELUARKAN SUARA PERINGATAN DAN LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「電力恢復」
 1. TEKAN TOMBOL **STOP** WARNA MERAH UNTUK MATIKAN SUARA.
 2. TEKAN TOMBOL **GO** WARNA HIJAU UNTUK TERUSKAN PENGOBATAN.
- BILAMANA LISTRIK TIDAK DIPULIHKAN SETELAH 2 JAM, MAKA TINGGALKAN MESIN, SETELAH LISTRIK PULIH BARU LAKUKAN LAGI PROSES PENGOBATAN.

KETERANGAN MESIN

BAGIAN BELAKANG LAYAR MONITOR BAK PEMANAS

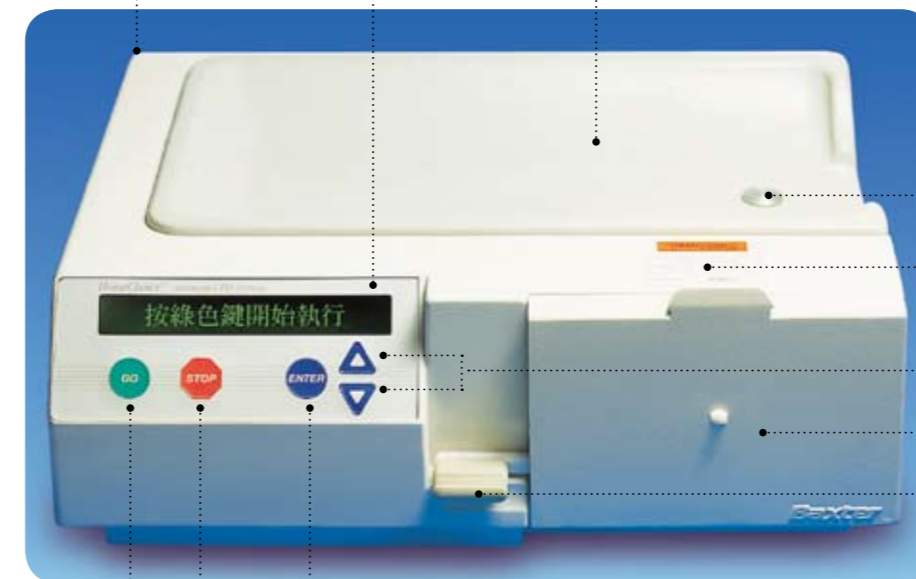

TOMBOL TEMPERATUR

NOMER MESIN

TOMBOL TURUN NAIK

PINTU

KUNCI PINTU

TOMBOL ENTER WARNA BIRU (PILIHAN)

TOMBOL STOP WARNA MERAH (MATIKAN SUARA)

TOMBOL GO WARNA HIJAU (MULAI)

KETERANGAN SET SELANG SEKALI PAKAI

BAGIAN TAMBAH PANAS (PENJEPIT WARNA MERAH)

BAGIAN TAMBAH ISIAN (PENJEPIT WARNA PUTIH)

BAGIAN ORANG SAKIT


BAGIAN TERAKHIR (PENJEPIT WARNA BIRU)

RAK SET SELANG

JALAN SALURAN

BAGIAN SALURAN

KARTU

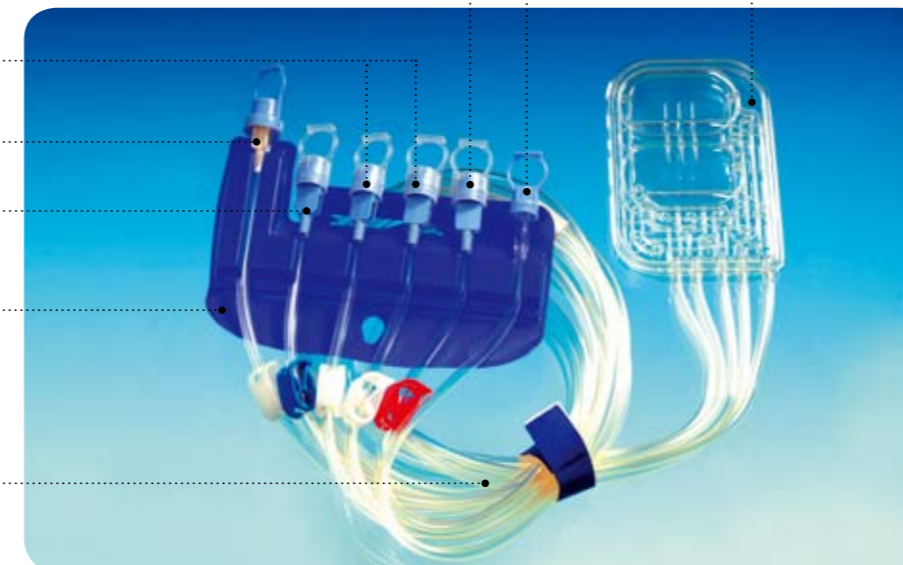

BUKU PETUNJUK CARA PAKAI
MESIN PENELITIAN OTOMATIS SITUASI DAN
KONDISI BAGIAN DALAM PERUT

HomeChoice™ -SISTIM YANG DAPAT DIANDALKAN



Science + Solutions + Systems + Support

Baxter

PILIHAN KELUARGA MESIN PENELITIAN OTOMATIS SITUASI DAN KONDISI BAGIAN DALAM PERUT



CIRI KHAS

- DAPAT DIANDALKAN—SUDAH DIPERGUNAKAN DI SELURUH DUNIA OLEH LEBIH DARI 500.000 KELUARGA
- LAYAR MONITOR BERBAHASA TIONGHOA, MUDAH DIPELAJARI DAN DIPERGUNAKAN
- STELAN KHUSUS PRIBADI, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ANDA
- MUNGIL DAN PRAKTIS UNTUK DIBAWA KEMANAPUN

LANGKAH-LANGKAH CARA PAKAI MESIN PENELITIAN OTOMATIS SITUASI DAN KONDISI BAGIAN DALAM PERUT

0 PERSIAPAN SEBELUM MULAI




1. SIAPKAN BARANG-BARANG YANG DIPERLUKAN
 - CAIRAN PENELITIAN YANG SEGAR
 - TONG PENAMPUNG (ATAU SELANG PANJANG)
 - SET SELANG YANG SEKALI PAKAI
 - PENUTUP MULUT ● 2 X TOPI MINI
 - CUCI TANGAN DENGAN CARA KERING

2. BERSIHKAN MEJA BAGIAN ATAS

* BERSIHKAN MESIN SEBELUM LISTRIK DINYALAKAN

1 NYALAKAN MESIN

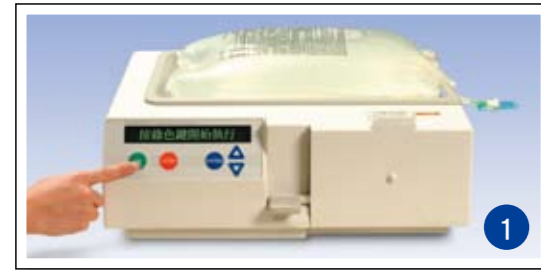

NYALAKAN SUMBER LISTRIK DAN TUNGGU LAYAR MONITORNYA TIMBUL SECARA OTOMATIS 「按綠色鍵開始執行」

1. MASUKKAN CAIRAN PENELITIAN KEDALAM TABUNG PANAS. CAIRAN INI HARUS LEBIH TINGGI DARIPADA TANDA UKURAN TEMPERATUR, LAIN KANTONG TAROHLAH DISAMPING MESIN. (GAMBAR 1)
2. PAKAILAH PENUTUP MULUT DAN CUCI TANGAN.
3. PERIKSA ISI CAIRAN PENELITIAN, KEKENTALANNYA, MASA BERLAKUNYA, TARIKAN TUANGAN KELUAR, PENUTUP WARNA HIJAU, Pandangan Fisik Luar Cairan Penelitian.
4. PERIKSA APAKAH TOPI PENGAMAN SELANG SEKALI PAKAI DALAM KONDISI SEMPURNA DAN TUTUP SEMUA PENJEPIT SELANG

TEKAN TOMBOL **GO** LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「裝置管組」

1. BUKALAH PINTUNYA DAN COLOKAN SET SELANG KEDALAMNYA, TUTUPLAH PINTUNYA DAN TEKAN SAMPAI KEDALAM SEKALI. (GAMBAR 2)
2. GANTUNGLAH SET SELANG DIATAS PINTU.
3. AMBIL SELANG SALURAN DAN CABUT RING, PASANGLAH SELANG SALURAN DENGAN KUAT DIBAGIAN ATAS TONG PENAMPUNG.



TEKAN TOMBOL **GO** LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「機器自我測試」, CUCILAH SEKALI LAGI TANGAN ANDA, SETELAH SELESAI CEK, LAYAR AKAN MEMPERLIHATKAN 「連接透析液袋」

1. CABUT PENJEPIT MERAH SELANG, SAMBUNGANLAH KEKANTONG CAIRAN, PATAHKAN PENUTUP WARNA HIJAU DAN BUKALAH PENJEPIT WARNA MERAH. (GAMBAR 3)
2. CABUT PENJEPIT WARNA PUTIH, SAMBUNGANLAH KEKANTONG CAIRAN, PATAHKAN PENUTUP WARNA HIJAU DAN BUKALAH PENJEPIT WARNA PUTIH. BILAMANA ANDA MAU MEMPERGUNAKAN CAIRAN YANG TIDAK SAMA KEKENTALANNYA PADA KANTONG TERAKHIR, MAKA SAMBUNGANLAH PENJEPIT WARNA BIRU KEKANTONG CAIRAN. PATAHKAN PENUTUP WARNA HIJAU DAN BUKALAH PENJEPIT WARNA BIRU.
3. BUKALAH PENJEPIT SALURAN BAGIAN ORANG SAKIT, BIARKAN SET SALURAN TERLIHAT DILUAR.



TEKAN TOMBOL **GO** LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「排氣」, CUCILAH TANGAN ANDA SEKALI LAGI. SETELAH SELESAI UDARA TERBUANG, MAKA LAYAR AKAN MEMPERLIHATKAN 「連接你自己」 DAN 「確定病人端管路」

1. SEBELUM SAMBUNGAN KEDIRI ANDA SENDIRI, YAKINKAN BAHWA CAIRAN PENELITIAN KEPENUHANNYA SUDAH MENCAPAI KEATAS RING TARIK, DAN PENJEPIT SELANG HARUS SUDAH DITUTUP.
2. AMBILKAN SALURAN KEORANG SAKIT, DAN SAMBUNGANLAH KESALURAN DIRI ANDA SENDIRI, DIPUTAR SAMPAI RAPAT. (GAMBAR 4)
3. BUKA PENJEPIT SELANG ORANG SAKIT DAN SALURAN CAIR.

2 PROSES PENGOBATAN DIMULAI



TEKAN TOMBOL **GO** LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「0週期引流」 (GAMBAR 5)

SETELAH SELESAI SIRKUIT MINGGUAN 0, MAKA PROSES PENGOBATAN DIMULAI. MESIN SECARA OTOMATIS AKAN MENGALIRKAN CAIRAN SERTA MEMBERHENTIKAN CAIRAN PENELITIAN SAMPAI SELESAI PROSES PENGOBATAN, PADA SAAT INI ANDA DAPAT BUKA PENUTUP MULUT, BISA JUGA MULAI MEMBACA BACAAN, ISTIRAHAT BAHKAN TIDUR.

3 PROSES PENGOBATAN SELESAI



TEKAN TOMBOL **GO** LAYAR AKAN MEMPERLIHATKAN 「關閉所有管夾」

SAMPAI BESOK PAGI SETELAH SELESAI PROSES PENGOBATAN, LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「治療完成」 (GAMBAR 6)

1. TUTUP SEMUA SALURAN YANG MENGALIR KETUBUH ANDA.
2. TUTUP SET SELANG BAGIAN ORANG SAKIT.



TEKAN TOMBOL **GO** LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「分離你自己」

1. PAKAI PENUTUP MULUT DAN CUCI TANGAN KERING.
2. BUKA BUNGKUSAN TOPI MINI, SETELAH SELESAI MELEPASKAN SELANG ORANG SAKIT, LANGSUNG PAKAILAH TOPI MINI YANG BARU. (GAMBAR 7)

TEKAN TOMBOL **GO** LAYAR MONITOR AKAN MEMPERLIHATKAN 「關機」, SILAHKAN ANDA MENCATAT SEMUA DATA-DATA KE "CATATAN HARIAN APD":

4 CATATAN



TEKAN TOMBOL **▽** 0週期引流量：XXXX ML (GAMBAR 8)
(SILAHKAN MENCATAT ANGKA YANG TERLIHAT DILAYAR MONITOR)

TEKAN TOMBOL **▽** 總脫水量：XXXX ML
(SILAHKAN MENCATAT ANGKA YANG TERLIHAT DILAYAR MONITOR)

TEKAN TOMBOL **▽** 平均留置時間：XX：XX (JAM：MENIT)
(SILAHKAN MENCATAT ANGKA YANG TERLIHAT DILAYAR MONITOR)

5 MATIKAN MESIN

BUKA PINTU DAN KELUARKAN KARTUNYA
MATIKAN SUMBER LISTRIK

6 LANGKAH BERIKUTNYA

SETELAH SET SELANG DAN CAIRAN PENELITIAN DILEPASKAN, MAKA SEMUANYA DIBUANG KEDALAM TONG SAMPAH. SETELAH SEMUA CAIRAN PENELITIAN YANG BERADA DALAM TONG SAMPAH, MAKA DIBUANGLAH KEDALAM CLOSET, BERSIHKAN TONG SAMPAH DAN DIKERINGKAN.